



Столик прикроватный Pino (Пино)

Руководство по эксплуатации



1. Предисловие

Уважаемый Клиент,

Благодарим Вас за доверие, которое Вы оказали нам, приобретая прикроватный столик Barry Pino (Барри Пино).

Каждое изделие тестируется производителем на безопасность и функциональность, и покидает завод в наилучшем состоянии.

В данном Руководстве содержится информация о функциях, необходимых для применения мебели. Таким образом, Вы можете регулярно обращаться к данному Руководству, как практическому справочнику.

2. Общая информация

Перед первым использованием прикроватного столика:

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы избежать повреждений, вызванных ошибочными действиями.
- Перед использованием проведите влажную обработку или продезинфицируйте столик.

2.1 Определение лиц и групп

Пользователи должны ознакомиться с данной инструкцией.

2.2 Информация о безопасности

Прикроватный столик представляет собой изделие, соответствующее современным технологиям.

Прикроватный столик может быть использован только в случае абсолютной уверенности в его исправном состоянии.

2.2.1 Правила безопасности пользователей

- Применение данного Руководства, которое должно быть предоставлено вместе с прикроватным столиком, гарантирует, что каждый пользователь будет ознакомлен с правилами безопасной работы перед его применением.
- В случае подозрения на повреждения или нарушение функциональной целостности столика, необходимо произвести его проверку.

2.3 Описание изделия

Конструктивно столик прикроватный имеет общие технические характеристики, обеспечивающие высокую степень комфорта, и имеет конструктивные особенности.

2.3.1 Предназначение

- Прикроватный столик является эффективным решением для создания комфорта и дополнительного ухода за лицами с пассивным образом жизни. Он создан для помощи в таком уходе.
- Данный столик может быть использован в домашних условиях.
- Прикроватный столик пригоден для многократного применения. При повторном использовании столика необходимо протереть и продезинфицировать, а также провести инспекцию его состояния.

2.3.2 Специфические особенности

Вес, кг	6,65
Размеры столешницы: ширина / глубина, см	61,5/43
Высота столика регулируемая (мин-макс), см	77-110
Количество секций	1
Колеса	4 шт
Фиксация колес	Тормоза на 4 колесах
Зазоры между колесами и полом, см	6,5
Максимальная нагрузка на столешницу, кг	10

2.3.3 Используемые материалы


Все применяемые материалы являются биологически безопасными для контакта с кожей пациентов и медицинского персонала.

2.3.4 Комплектация

Прикроватный столик поставляется в разобранном виде. В комплекте столик, крепежные детали и руководство по эксплуатации.

2.3.5 Инструкция по сборке

1. Извлеките изделие из упаковки.
2. Соберите столик согласно схеме сборки.
3. Установите положение столешницы под нужным углом и зафиксируйте его, вставив ручку регулировки в нужное отверстие.

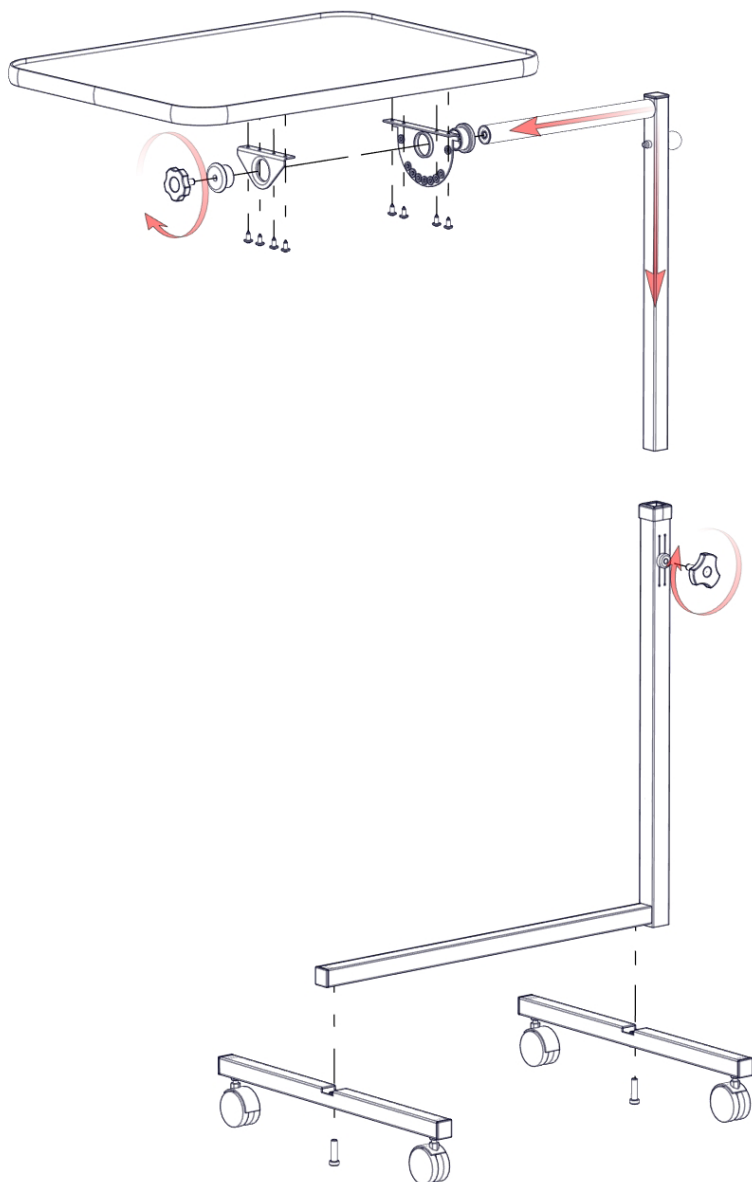

3. Очистка и дезинфекция

3.1 Общая информация

Не зависимо от того, прикроватный столик используется одним пользователем или несколько, его регулярная очистка весьма существенна для обеспечения необходимой гигиенической обстановки. Прикроватный столик должен быть протерт и продезинфицирован перед тем, как им воспользуется новый пользователь.

3.2 Инструкции по очистке и дезинфекции

Прочистить все поверхности столика и протереть тканью, смоченной мягким экологически безопасным чистящим агентом. Если прикроватный столик загрязнен инфекционными или потенциально опасными материалами, следует продезинфицировать его, обработать агентами, одобренными для проведения дезинфекции химическим методом и пригодными для соответствующих поверхностей.

Примечание: продолжительная дезинфекция необходима только в больницах, при наличии у пациента мультирезистентного патогена. Дезинфекция прикроватного столика непосредственно на месте имеет то преимущество, что таким образом предотвращается перемешивание «чистой» и «грязной» мебели при их транспортировке. Это в свою очередь, предотвращает распространение внутрибольничных болезнетворных микроорганизмов. Неиспользуемый прикроватный столик должен быть отправлен на хранение в накрытом состоянии, для предохранения его от загрязнения.

3.3 Чистящие и дезинфицирующие агенты

Чтобы максимально продлить срок службы прикроватного столика следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Рекомендуется протирать поверхность прикроватного столика влажной тканью. Чистящие вещества должны быть мягкими (неагрессивными к коже и поверхности) и экологически чистыми. Можно использовать бытовые очистительные средства.
- Для очистки металлических поверхностей, следует использовать мягкую ткань, увлажненную бытовым средством, предназначенным для гигиенической очистки поверхностей бытовой мебели.

- Дезинфекцию прикроватного столика проводят путем протирки с применением дезинфицирующих средств, одобренных для проведения дезинфекции химическим методом в рекомендованных концентрациях. Ни в коем случае нельзя применять абразивные средства, которые могут повредить поверхность.

Примечание: Дезинфицирующие средства на альдегидной основе имеют преимущество перед другими, поскольку у них широкий спектр воздействия, относительно низкий протеиновый эффект и экологическая безвредность. Главный недостаток таких агентов в том, что они могут оказаться аллергенами и раздражителями.

Средства на глюकोпротаминовой основе не имеют этих недостатков, и столь же эффективны, однако стоят они относительно дороже. Средства на хлорсодержащей основе приводят к коррозии металлов, синтетических материалов, резины и других материалов во время длительного применения или при слишком высоких концентрациях. Таким образом, такие вещества имеют более высокий, так называемый, протеиновый эффект, являются раздражителями слизистых оболочек и демонстрируют низкую экологическую совместимость.

3.3.1 Обращение с дезинфицирующими веществами

- Необходимо в точности соблюдать дозировку. Рекомендуются автоматические дозаторы.
- Всегда готовить растворы в холодной воде, чтобы избежать образования паров, раздражающих слизистые оболочки.
- Надевать перчатки для исключения контакта с кожей.
- Никогда не следует оставлять готовые дезинфицирующие растворы в открытых сосудах с плавающими на поверхности кусками ткани. Необходимо всегда закрывать контейнеры.
- После завершения дезинфекции провентилировать помещение.
- Дезинфекцию производить протиркой. Исключить распыление при котором выделяются большие порции вещества, что может привести к его попаданию в дыхательные пути.
- Не следует применять этанол для дезинфекции поверхности с большой площадью.

4. Техническое обслуживание

Прикроватный столик спроектирован и сконструирован для применения в течение длительного времени. Срок его службы 10 лет при соблюдении правил эксплуатации в зависимости от условий и частоты применения.

Многократные перемещения, неправильное использование, а также длительное применение могут приводить к повреждениям, появлению дефектов и признаков износа, что может создавать опасность, если не устранять такие дефекты вовремя.

Необходимо проинструктировать пользователей в нижеследующих правилах.

Необходимо производить минимальную визуальную проверку состояния прикроватного столика каждый раз перед повторным применением.

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться к эксперту с требованием о техобслуживании или ремонте. Пользователь ни в коем случае не должен пытаться устранить неисправность самостоятельно.

5. Хранение

Упакованный столик должен храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей. Хранение надлежит осуществлять при следующих условиях: Температура: от +2°C до +50°C; относительная влажность: 45 - 75% (без конденсации); атмосферное давление: 500 - 1060 гПа.

6. Транспортировка

Прикроватный столик можно транспортировать любыми видами транспорта. При транспортировке водным, смешанным железнодорожно-водным или авто-водным транспортном упаковки должны прокладываться слоем водонепроницаемой или полиэтиленовой пленкой. Температура: от - 20°C до + 50°C; относительная влажность: до 70% (без конденсации); атмосферное давление: 500 - 1060 гПа. Технические характеристики товара могут незначительно отличаться из-за постоянного улучшения производителем качества продукции.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской уточняйте на сайте www.sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Столик прикроватный Barry Pino (Барри Пино)

Производитель: ARIDES LLC

111, Raffi Street, Malatia-Sebastia, 0064 Yerevan, Republic of Armenia

www.arides.am

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18.

Тел.: 8(495) 792-31-90, 8(800) 200-31-90.

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.
